

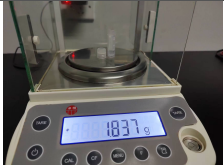
2ml 冻存管容量测量报告

1、基本信息

产品名称/规格	外旋冻存管 2ml	数量/批号	共 10 个/20250505
实验类型	容量检测	报告人	陈华丽
试样日期	2025/05/05	报告日期	2025/05/05
备注	 刻度线 1.8ml		

2、仪器：电子天平 编号:BL1305

3.试验内容

测试项目	技术要求	结果及判定	测试图片	备注
容量刻度线	总容量及各刻度线容量在 $\pm 5\%$ 以内	符合		

3.1 检测方法：电子天平清零，放置冻存管称量空管重量，加纯化水至刻度线位置称重，加水重量减去空管重量为冻存管容量；

3.2 检测结果 容量范围：1.710-1.890

编号	容量 g	编号	容量 g
1	1.837	6	1.842
2	1.850	7	1.837
3	1.829	8	1.863
4	1.839	9	1.836
5	1.828	10	1.842
平均值	1.840	RSD	0.01
与标示值偏差	2.2%		

4.结论：本批产品 2ml 冻存管容量在规定的范围内。